



## Medikal Paketleme için Çeneli Rulo Kesme-Kapatma Cihazı Reel Cutting-Impulse Sealing Machine for Medical Packaging

**40GM 6LCSFVIP** Code: 222-300-040

Personel maliyetini 70% düşürür **Reduces personnel cost by 70%**

Saatte 6100 poşet üretme hızı

**Speed of producing 6100 pouches per hour**



2 cihaz bir arada / 2 devices in one




Entegre Etiketleme Sistemi  
Integrated Labelling System

MOD 1	MOD 2
	+
Kesme	Kesme+Kapama
Cutting	Cutting+Sealing

Çok Dilli, Kullanıcı dostu 4,3" Dokunmatik Renkli Ekran  
Multilingual, User-friendly 4,3" Touch Color Screen



QR Kod Okuyucu QR Code Scanner  
A150 GM150QRR 222-300-4300730

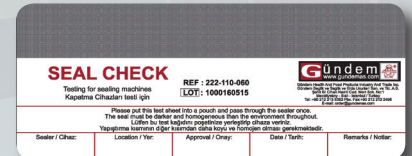

ISO 11607-2'ye uygunluk "Seal-Check" Test  
Seal-Check Test According ISO 11607-2

Teknik Veriler / Technical Data 1	
Kullanıcı emniyeti Acil Mantar Stop Butonu User safety Emergency Mushroom Stop Button	√
CE ve EN ISO 11607-2'ye uygunluk testi ValidTest® (Patent kararında) Özelliği; "Validasyon & Kalibrasyon Testi" / Compliance test with CE and EN ISO 11607-2 ValidTest® (Patent pending) Feature; "Validation & Calibration Test"	√
Bakım gerektirmeyen Teflon® kaplama teknolojisi / Maintenance free Teflon® coating technology	√
Çok Dilli, Kullanıcı dostu 4,3" Dokunmatik Renkli Ekran / Multilingual, User-friendly 4,3" Touch Color Screen	√
Uyku Modu ile enerji tasarrufu Energy saving with Sleep Mode	√
3 dk'da ısınma ve soğutma teknolojisi Heating and cooling technology in 3 min.	√
Barkod Okuyucu & Yazıcı bağlanabilme Connection to Barcode Scanner & Printer	√
Saatteki poşet üretim hızı (8 ad. 5cm genişlikteki rulo 10cm boyda) / Pouch production speed per hour (8 pcs. 5cm wide roll 10cm length)	6100

Teknik Veriler / Technical Data 2	
Aynı anda 8 adet (5cmlik) veya 43cmlik rulo işleme kapasitesi / At the same time, 8 rolls (5cm) or 43cm processing capacity	√
QR kod okuyucuya, bağlanabilme / Ability to connect to QR code reader	√
3 Tuş + Onayla işleme başlama / 3 Keys + Confirm operation start	√
Kesilecek poşet boyu aralığı Pouch length range to be cut (cm)	10-125
Kesme Sayacı / Cutting Counter	√
Sadece kesme veya aynı anda kesme, kapama işlemi / Cutting only or simultaneously cutting, sealing process	√
Ayarlanabilir Kapama Sıcaklık ve Süresi Sealing temperature and Time adjustment	√
Güvenlik: Çift besleme kontrolü Safety: Double Feeding control	√
Şifre korumalı giriş Password protected login	√
Materyal: Düz, Körüklü, Tyvek® Material: Flat, Gussested, Tyvek®	√
2 farklı modta çalışma Working in 2 different modes	√

Teknik Veriler / Technical Data 3	
Elektrik kesilse bile ayarlar silinmez, tarih zaman güncellenir / Even if the power is cut, the settings are not deleted, the date and time are updated	√
12mm çoklu bariyerli (Multiline) kapatma 12mm multi-barrier (Multiline) sealing	√
Kendini bileyen yuvarlak bıçak Self sharpening rounded blade	√
Entegre edilmiş Dahili Etiket Yazıcısı With integrated internal thermal printer	√
Çalışma Sıcaklığı Sealing Temperature	50-220 ± 2°C
Güç sarfıyatı Normal & Uykuda (Watt) Power consumption in Normal & Sleep Mode	600 & 20
Çalışma voltajı (VAC) ve frekansı (Hz) Operating voltage and frequency	230 V 50 Hz.
2 yıl garanti, yılda sadece 1 kez bakım 2-year warranty, maintenance only once a year	√
Ebatlar [Boy x En x Yükseklik] (mm.) Dimensions [Length x Deep x High] For 62GM için: 1090 x 281 x 234	772 x 242 x 252
Cihaz Ağırlığı [Kg.] / Unit Weight	28
Tabla Ağırlığı [Kg.] / Table Weight	2,8

## Aksesuarlar / Accessories

Çalışma İstasyonu / Working Station  
A105 GM1215WST 223-300-012

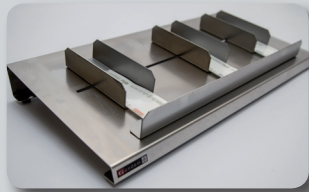


Tabla / Table  
GM450TC 222-310-010

Kitap-Klasör Desteği  
Book-Folder Support  
223-300-997


QR Kod Okuyucu  
QR Code Scanner  
A150 GM150QRR  
222-300-4300730

Işıklı Büyüteç  
Lamb with Magnifier  
223-300-999

Sehpa Shelf  
A055 GM632CCS  
222-110-028

Sepet / Basket  
GM500-KC\_222-110-050

Mobil Masa  
Mobile Table  
A085 GM1000TF  
222-110-041

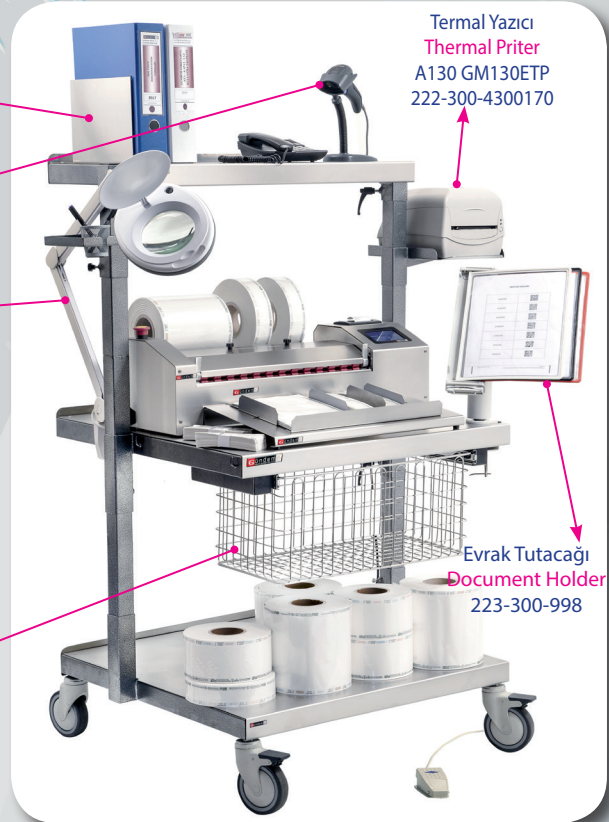

Termal Yazıcı  
Thermal Priter  
A130 GM130ETP  
222-300-4300170

Evrak Tutacağı  
Document Holder  
223-300-998

Diğer ürün & modeller için / For other products & models / Pour d'autres produits & modèles: [www.gundemas.com](http://www.gundemas.com)

