


since / depuis

1990

dan günümüze
sterilizasyonda Uzman Kuruluş
the Expert Organization on Sterilization
la fondation experte en matière de Stérilisation

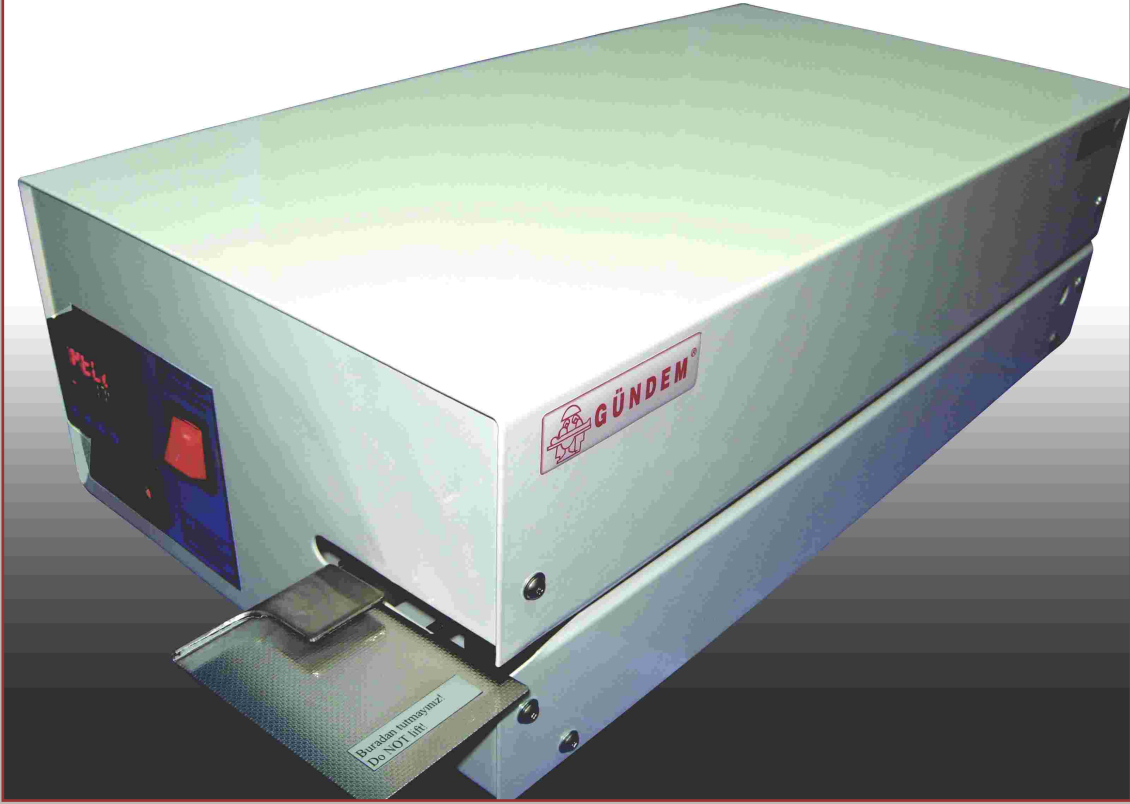

GD 11HAN

Art. No: 221-300-010

Yarı otomatik sürekli kapatma cihazı
Semi automatic rotary band sealer
Appareils semi-automatique de soudage de film

Gündem® **Q**uality **M**anagement **S**ystem
Kalite **Y**önetim **S**istemi

Sertifikalar / Certificates / Certificats

Satış Sonrası Hizmet
Yeterlilik Sertifikası



Certificat de Suffisance
de Service Après Vente



Certificate of the Service
Efficiency After Sales

ISO 9001



Sağlık Ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.
Health And Food Products Industry And Trade Inc.

Gündem, ABGIndicators, ABGM ve ABGPack, Gündem A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.
The Gündem, ABGIndicators, ABGM & ABGPack brands are Trade Marks of the Gündem Inc.
Gündem, ABGIndicators, ABGM & ABGPack, sont des marques enregistrées de Gündem S.A.
All other trademarks referred to in this document are the property of their respective owners.

GÜNDEM® Dental&Medikal Serisi / Dental&Medical Series Machines

GD 11HAN — Patent kararında / Patent pending / En décision de brevet

Yarı otomatik sürekli kapatma cihazı.
Hastaneler, klinikler ve cerrahlar ile
dentistler için.

Sterilizasyon poşetlerinin yapılandırılması
için CE & EN-ISO 11607-2'ye uygun, güvenilir
kapatma cihazı

- Dijital göstergeli ayarlanabilir sabit ısı sistemi
- Teflon bantsız ve yanmaz ısıtma sistemi
- Dakikada 11metre poşet kapatma hızı
- Acil durumlarda el ile "Poşet Geri Çıkartma" özelliği
- Çift besleme kontrollü hatası engelleme sistemi
- DIN standardına göre kapatılan poşetin 30mm mesafelik açma kenarı ayarlayabilme
- Kolay servis imkânı, modüler cihaz yapısı sayesinde parçalara kolay erişim
- 2 Yıl çalışma garantisi.
- Garanti & Bakım kapağı sayesinde cihaza "Yetkili Servis Hizmeti" garantisi.
- Darbe Sensörlü "Nakliye Takip Sistemi".

Semi Automatic rotary band sealer with
large sealing capacity for industry's
hospital's, doctor's and dentist's
surgeries

A future oriented system for the reliable sealing
of sterilization packaging materials in accordance
with CE & EN-ISO 11607-2.

- Adjustable digital thermo-control system
- Special heating system with non fabric Teflon®
- High sealing speed 11m/min.
- For emergency situations, motor reverse start-up feature to take the pouch out
- Double secured in feed – prevents malfunctions of the unit
- Safety clearance between the seal edge and packed material, 30 mm in accordance with DIN
- Easy-to-service, plug-in modular system comprising electronic components
- 2 year works guarantee
- Service warranty of authorized services to device thanks to Guarantee & Maintenance cup
- Transport tracking system with Stroke Sensor.

Appareil de soudage de film en continu
avec puissance élevée de soudage
pour l'utilisation dans l'industrie
et dans les cabinets médicaux.

Le système modulaire; le système d'avenir
pour une fermeture garantie des emballages
de produits stériles conformément à la
norme CE & EN-ISO 11607-2.

- Système de thermo-contrôle numérique
- Système de chauffage sans bande Teflon® et ininflammable
- Vitesse de fermeture emballage de 11 mètres/minute.
- Fonction "reprise du sachet" en cas d'urgence
- Double sécurité - prévient les cas de panne dans l'appareil
- Distance de sécurité du bord de soudage au produit à emballer, 30 mm d'après DIN
- Système modulaire enfichable des composants électroniques, facile d'utilisation
- 2 ans garantie de bon fonctionnement
- "garantie & Service agréé" pour l'appareil à cause de la présence du couvercle Garantie & Entretien.
- "Dispositif de suivi de transportation" avec capteur à chocks.

Teknik Veri

Kapatma hızı	11 m/dak.
Sıcaklık kontrolü	elektronik
Kapatma sıcaklığı	0 – 220°C
Sıcaklık toleransı	± 1 %
Kapatma kenarı	0 – 30 mm
Kapatma genişliği	12 mm
Güç kaynağı	230 V / 5 0 Hz 115 V / 6 0 Hz
Ortalama güç	500 watt
Ebatlar Boy x En xYük	486 x 255 x 164 mm
Yaklaşık ağırlık	13 kg
Gövde	beyaz R.A.L. 9010

Aksesuarlar

Poşet taşıyıcı levha	GD 110TC
Ebatlar Boy x En xYük	587 x 270 x 58 mm
Rulmanlı Konveyör	GM 140RT
Ebatlar Boy x En xYük	587 x 270 x 56 mm
Poşet taşıyıcı & kesici	GM 632CM

Teknik veriler önceden değiştirilebilir!

Technical data

Sealing speed	11 m/min.
Temperature control	electronic
Sealing temperature	0 – 220°C
Temperature tolerance	± 1 %
Seal edge, variable	0 - 30 mm
Sealing seam smooth	12 mm
Mains connection	230 V / 5 0 Hz 115 V / 5 0 Hz
Power	500 watt
Dimensions w x d x h	486 x 255 x 164 mm
Approximate weight	13 kg
Paint finish	white, RAL 9010

Accessories

Side table	GD 110TC
Dimensions l x d x h	587 x 270 x 58 mm
Roller table	GM 140RT
Dimensions l x d x h	587 x 270 x 56 mm
Reel holder & Cutter	GM 632CM

Technical alterations without prior notice

Caracteristiques Techniques

Vitesse de soudage	11 m/min.
Commande de température	électronique
Température de soudage	0 - 220°C
Tolérance de température	± 1 %
Bord de soudage	0 – 30 mm
Largeur de soudage	12 mm
Branchement réseau	230 V / 5 0 Hz 115 V / 5 0 Hz
Puissance	500 watt
Dimensions l x p x h	486 x 255 x 164 mm
Poids environ	13 kg
Laquage	blanc, RAL 9010

Accessories


Table rallonge	GD 110TC
Dimensions l x p x h	587 x 270 x 58 mm
Convoyeur à roulement	GM 140RT
Dimensions l x p x h	587 x 270 x 56 mm
Reel holder & Cutter	GM 632CM

Sous réserve de modifications techniques!




GM140RT_222-110-010

Rulo Konveyör
Roll Conveyor
Convoyeur à rouleaux

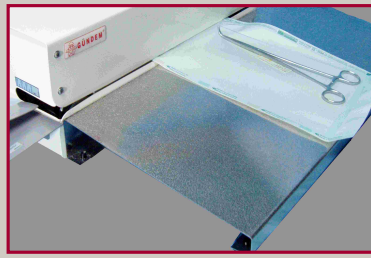

GD110TC_221-310-010

Rulo Tablası
Roll Tray
Table de rouleau

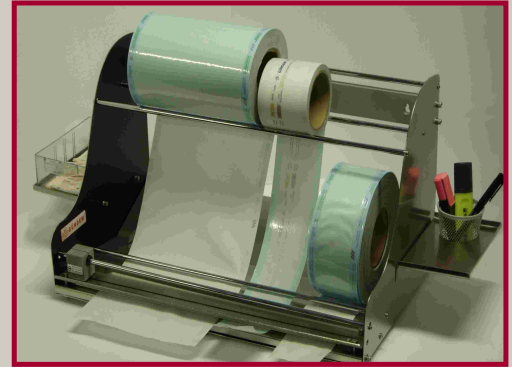

GM632CM_222-110-030

Rulo Kesme & Taşıma Standı
Roll Cutter & Holder
Coupe de rouleau et porteur

%100 Yerli Sermaye

Üretici / Manufacturer / Producteur:

Diğer modeller için / For other models visit us: www.gundemas.com



Sağlık Ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.
Health And Food Products Industry And Trade Inc.

Distribütör / Bayi:

Address: Mecidiyekoy Mahallesi, Dereboyu Caddesi No.: 84/A, P.B: 34387 Şişli, Istanbul - Turkey

Tel.: +90 - 212 - 213 5353 Pbx, Faks: +90 - 212 - 212 2498 /E-mail : satis@gundemas.com

International Fax: +90 - 212 - 212 2641 /E-mail : order@gundemas.com

Web: www.gundemas.com