



Medikal Paketleme için Rulo Kesme-Kapatma-Yazma Cihazı Rotary Reel Cutting-Sealing-Printing Machine for Medical Packaging

Tek Satır Yazıcı / With single line printer : 60GM 6LCS1PVL Code: 222-300-060

Çift Satır Yazıcı / With double line printer : 62GM 6LCS2PVL Code: 222-300-062

Personel maliyetini 80% düşürür

Reduces personnel cost by 80%

Saatte 6000 poşet üretim hızı

Speed of producing 6000 pouches per hour

Auto-Slider® (Patent Kararında) Özelliği; Ruloları cihazdan kaldırmadan otomatik mod değiştirebilme

Auto-Slider® (Patent pending) feature; Automatic mode change without removing the rolls from the device




5 cihaz bir arada / 5 devices in one

MOD 1	MOD 2	MOD 3	MOD 4	MOD 5
	+	+ +		+
Kesme	Kesme+Kapama	Kesme+Kapama+Yazma	Kapama	Kapama+Yazma
Cutting	Cutting+Sealing	Cutting+Sealing+Printing	Sealing	Sealing+Printing

Bilgisayar temelli, Çok Dilli, Kullanıcı dostu 7" Dokunmatik Renkli Ekran
Computer based, Multilingual, User-friendly 7" Touch Color Screen

CE & EN ISO 11607-2'ye uygun "Validasyon Testi" & Raporlama
Performs the "Validation Test" to compliance with
CE & EN ISO 11607-2 and reports

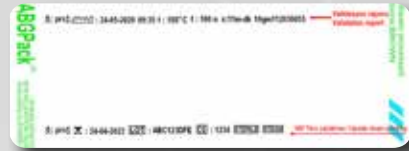

Acil Geri

Emergency backward



Acil İleri

Emergency forward

Poşet sıkıştırsa iş durmaz, teknik servis, yedek parça gerekmez!

If the pouch is jammed, the job will not stop, technical service, spare parts are not required!

Düz, kövrüklü ve Tyvek poşetler ile "Seal-Check" Test başarılı olur
With flat, gusseted and Tyvek pouches, the "Seal-Check" Test is successful

Detaylı teknik veriler arka sayfadadır
Detailed data is on the next page:



Teknik Veriler / Technical Data 1	
Kullanıcı emniyeti Acil Mantar Stop Butonu User safety Emergency Mushroom Stop Button	√
CE ve EN ISO 11607-2'ye uygunluk testi ValidTest® (Patent kararında) Özelliği; "Validasyon & Kalibrasyon Testi" & Raporlama Compliance test with CE and EN ISO 11607-2 ValidTest® (Patent pending) Feature; "Validation & Calibration Test" & Reporting	√
Bakım gerektirmeyen Teflon® kaplama teknolojisi / Maintenance free Teflon® coating technology	√
Bilgisayar temelli, Çok Dilli, Kullanıcı dostu 7" Dokunmatik Renkli Ekran / Computer based, Multilingual, User-friendly 7" Touch Color Screen	√
Stand-By ve Uyku Modu ile enerji tasarrufu Energy saving with Stand-By and also Sleep Mode	√
3 dk'da ısınma ve soğutma teknolojisi Heating and cooling technology in 3 min.	√
Acil durumda Motor Geri, İleri ve Stop fonksiyonu / Emergency, Motor Reverse, Forward and Stop function	√
5 farklı moda çalışma / Working in 5 different modes	√
Ekranında, anlık basınç, sıcaklık ve hız izleme Pressure, temperature, speed can be monitored instantly	√
5 şifre korumalı veya şifresiz giriş 5 password protected or unencrypted logins	√
Materyal: Düz, Körüklü, Tyvek® Material: Flat, Gussested, Tyvek®	√
Güvenlik: Çift besleme kontrolü Safety: Double Feeding control	√
Çalışma Sıcaklığı Sealing Temperature	50-220 ± 2°C
Güç sarfiyatı Normal & Uykuda (Watt) Power consumption in Normal & Sleep Mode	500 & 20
Çalışma voltajı (VAC) ve frekansı (Hz) Operating voltage and frequency	230 V 50 Hz.
Ebatlar [Boy x En x Yüksek] (mm.) Dimensions [Length x Deep x High] For 62GM için: 1090 x 281 x 234	1066 x 281 x 234
Ağırlık [Kg.] / Weight For 62GM için: 38 Kg.	33

Teknik Veriler / Technical Data 2	
Auto-Slider® (Patent kararında) Özelliği; Ruloların cihazdan kaldırmadan otomatik mod değiştirebilme / Auto-Slider® (Patent Pending) feature; Automatic mod change without removing the rolls from the device	√
Aynı anda 8 adet (5cmlik) veya 43cmlik rulo işleme kapasitesi / At the same time, 8 rolls (5cm) or 43cm processing capacity	√
9999 adet Hafıza: Ürün/Set adı tanımlama ve her biri için SKT, poşet genişliği kaydı / 9999 Pcs. Memory: Defining product / Set name and recording Expiry date & pouch width for each.	√
Her bir ürün, set için BARKOD numaraları girişi veya otomatik oluşturma BARCODE numbers entry or auto generate for each product set	√
QR kod okuyucuya, Harici Klavyeye, Monitöre, Termal (Barkod) yazıcıya ve MSÜ yazılımına bağlanabilme/Ability to connect to QR code reader, External Keyboard, Monitor, Thermal printer and CSSD software	√
Tek dokunuşla; Mod, Sıcaklık, Hız değiştirme ve Hızlı kayıt / With one touch; Mode, Temperature, Speed change and Fast recording	√
Kesilecek poşet boyu aralığı Pouch length range to be cut (cm)	4-125
Kesme ve Poşet Sayaçları ile Geri Sayaç Cutting and Pouch Counters and Back Counter	√
Aynı anda kesme, kapama ve ters yazma işlemi Simultaneous cutting, closing and reverse writing	√
Kablosuz, internetten ücretsiz yazılım güncelleme / Wireless, free software update from net	√

Teknik Veriler / Technical Data 3	
Saatteki poşet üretim hızı (8 ad. 5cm genişlikteki rulo 10cm boyda) / Pouch production speed per hour (8 pcs. 5cm wide roll 10cm length)	6000
Arıza halinde veya 1 rulo bile bittiğinde durup, alarm verme / In case of malfunction or even 1 roll is over, stop and alarm	√
Elektrik kesilse bile ayarlar silinmez, tarih zaman güncellenir / Even if the power is cut, the settings are not deleted, the date and time are updated	√
Kapama modlarında Soft-Start ve 10-16m/dk hız ayarı / Soft-Start and 10-16m / min speed setting in sealing modes	√
14mm çoklu bariyerli (Multiline) kapatma 14mm multi-barrier (Multiline) closure	√
5cm'lik poşete iki farklı veri yazabilme Can write two different data in a 5cm pouch	√
WriteMatic® (Patent kararında) özelliği; Otomatik yazı font ayarı / WriteMatic® (Patent Pending) feature; Automatic font setting	√
Font, harf aralığı, yazmaya başlama ayarı, tekst veya piktogram ile yazımı / Font, letter spacing, typing start setting, text or pictogram writing	√
Kartuş Yok® (Patent kararında) Özelliği, ters yazma, kalıcı, geçici sayaç, geri sayım, EN 980 (ISO 15223-1) sembolleri / No Ink Ribbon® (Patent Pending) feature, printing 180 degree inverted permanent, temporary counter and countdown, LOT, CE, STEAM, VH2O2, EO, LTF, STERILE symbols	√
Kendini bileyen yuvarlak bıçak / Self sharpening rounded blade	√
2 yıl garanti, yılda sadece 1 kez bakım 2-year warranty, maintenance only once a year	√

Aksesuarlar / Accessories



QR Kod Okuyucu
QR Code Scanner
A150 GM150QRR
222-300-4300730



Termal Yazıcı
Thermal Printer
A130 GM130ETP
222-301-4300170



Konveyör / Conveyor
A045 GM140RTXL
222-110-111



Mini sepet / Mini basket
GM250KC_222-110-045

Kitap-Klasör Desteği
Book-Folder Support
223-300-997

Işıklı Büyüteç
Lamb with Magnifier
223-300-999

Evrak Tutacağı
Document Holder
223-300-998

Sepet / Basket
GM500-KC_222-110-050

Çalışma İstasyonu / Working Station
A105 GM1215WST 223-300-012

Diğer ürün & modeller için / For other products & models / Pour d'autres produits & modèles: www.gundemas.com

